


Souprava zdravotnických prostředků Danis

SX-ELLA Stent Danis



Danis

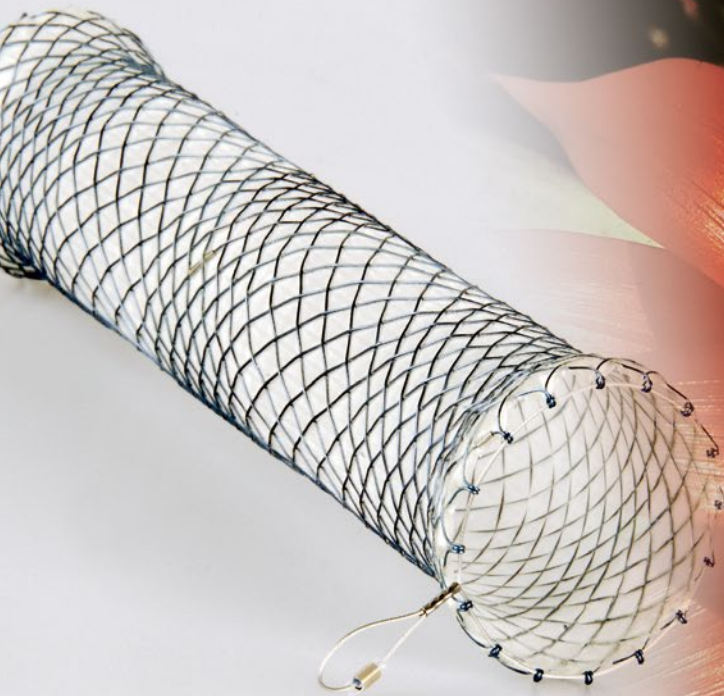

Vyjímatelný stent pro zastavení akutního krvácení z jícnových varixů

Jednoduché zavedení bez nutnosti endoskopické či radiologické kontroly

Bezpečná zástava krvácení okamžitým stlačením jícnových varixů

Umožnění perorálního příjmu potravy po zavedení stentu



3D animace



Základní popis

Souprava zdravotnických prostředků s SX-ELLA Stentem Danis

Plně krytý samoexpandibilní nitinolový stent připravený k implantaci. Kompletní implantační set zahrnuje veškeré součásti pro zavedení.

Indikace

SX-ELLA Stent Danis je určen k zástavě akutního a/nebo refrakterního krvácení z jícnových varixů.

Kontraindikace

- ☑ Diagnostikovaný zhoubný nádor nebo zúžení postihující jícen
- ☑ Ozařování hrudníku nebo jícnu v anamnéze
- ☑ Zhoubný nádor hrdla nebo hrtanu
- ☑ Zhoubný nádor průdušek nebo plicí
- ☑ Rakovina žaludku
- ☑ Podezření na krvácení způsobené poškozením horní části gastrointestinálního traktu cizím tělesem

Unikátní vlastnosti

- ☑ Variabilní výplet je přizpůsoben jícnové peristaltice - nižší stupeň migrace.
- ☑ Variceální komprese způsobuje efektivní zástavu krvácení.
- ☑ Atraumatické konce stentu.
- ☑ Rentgenkontrastní značky na obou koncích a uprostřed stentu - přesné umístění stentu.
- ☑ Vývazové lanko ze speciální slitiny pro medicínské účely na obou koncích stentu - vysoká pevnost a odolnost proti kyselinám.
- ☑ Jednoduché vyjmutí po 7 dnech od implantace.

Výhody této metody

- ☑ Snadné zavedení i v závažných situacích, bez nutnosti endoskopie / kontroly rentgenem.
- ☑ Perorální příjem vhodné stravy je možný ihned po implantaci.

Doplňující údaje

Souprava zdravotnických prostředků Danis (019-08S-25-135) se skládá z plastového kufříku, který obsahuje všechny součásti potřebné pro implantaci stentu:

- ☑ Komprimovaný stent v zaváděcím systému, vodící drát, plastové injekční stříkačky, náustek, emetní miska, papírový bryndáček, plastový pytel na odpady, rukavice.




Basic set zdravotnických prostředků Danis (019-08S-25-135-B) obsahuje:

- ☑ Komprimovaný stent v zaváděcím systému, vodící drát, 50 ml plastová injekční stříkačka.

Zaváděcí systém 9,4 mm (28 F) / 6,6 mm (20 F) je dodáván ve standardní délce 60 cm.

Nabízené rozměry

Číslo REF	SX-ELLA Stent Danis			Zaváděcí systém	
	Průměr hrdla stentu [mm]	Průměr těla stentu [mm]	Nominální délka [mm]	Aktivní délka [mm]	Vnější průměr [F]
019-08S-25-135	30	25	135	60	28 / 20
019-08S-25-135-B	30	25	135	60	28 / 20

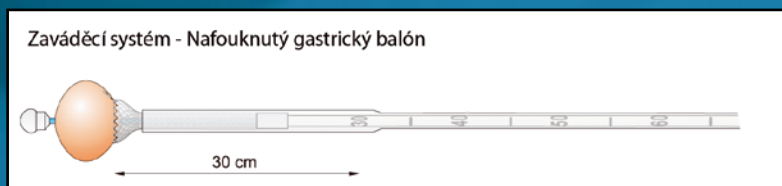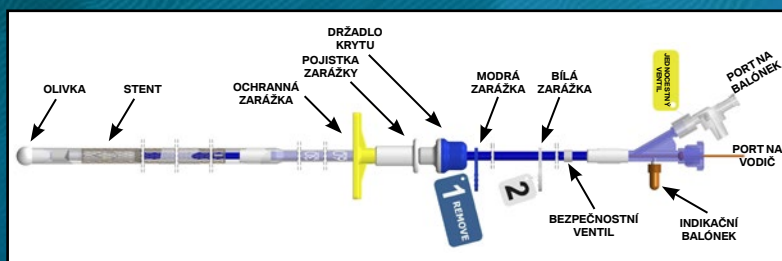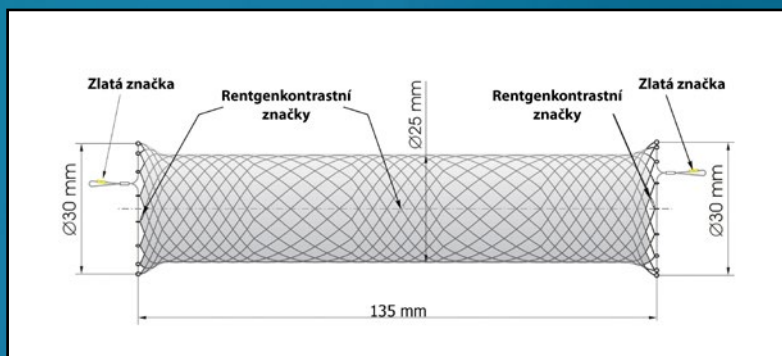

Výrobce:

ELLA-CS, s.r.o.

Milady Horákové 504/45, Třebeš

500 06 Hradec Králové, Česká republika

Tel.: +420 495 279 111 Fax: +420 495 265 655

E-mail: info@ellacs.eu URL: www.ellacs.eu