



Enterella

SX-ELLA Stent Kolorektální

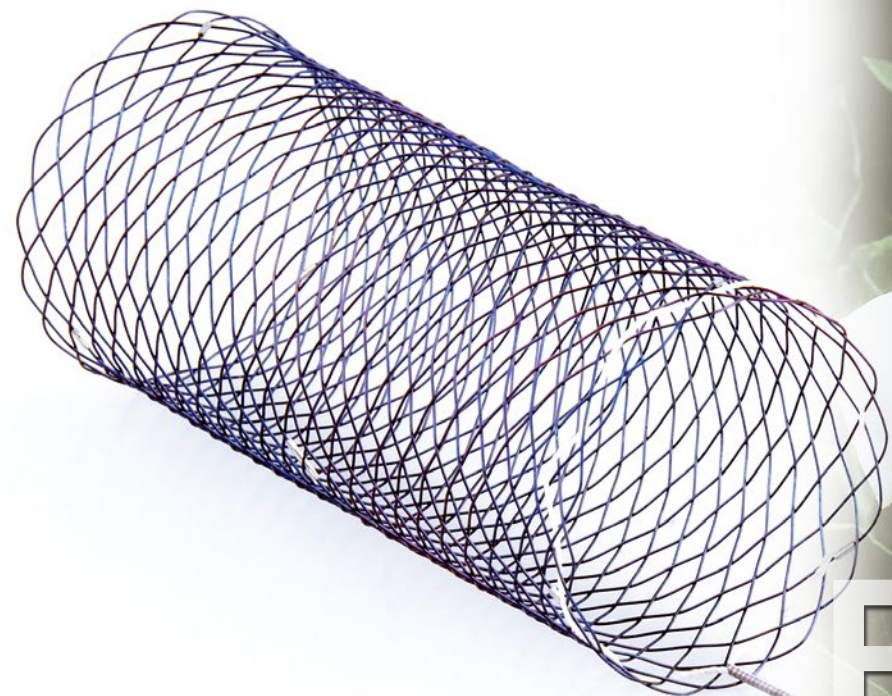

Enterella

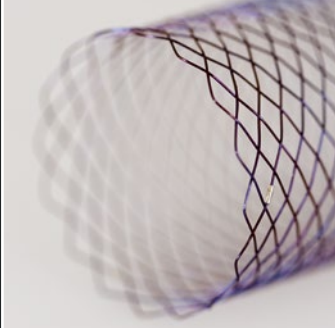

Snadné uvolnění

Vynikající flexibilita

Atraumatické konce stentu

Hladký povrch v ohybu stentu



Základní popis

SX-ELLA Stent Kolorektální - Enterella

Stent lze zavést pod endoskopickou nebo fluoroskopickou kontrolou. Samoexpandibilní nitinolový stent připravený k implantaci v zavaděcím systému PULL.

Indikace

Paliativní léčba obstrukcí nebo striktur způsobených maligními tumory postihujícími rektum, sigmoideum nebo distální část sestupného tračniku. Může být také použit pro dočasné uvolnění takových obstrukcí před elektivní chirurgií.

Kontraindikace

- ☑ Střevní perforace
- ☑ Peritoneální absces
- ☑ Významný ascites
- ☑ Závažná koagulopatie
- ☑ Střevní ischémie
- ☑ Umístění střevní obstrukce / striktury mimo anatomické struktury definované v části Indikace


Unikátní vlastnosti

- ☑ Atraumatické konce - účinná prevence poranění střevní stěny.
- ☑ Vynikající ohebnost - dokonalé přizpůsobení a dostatečná expanze podél anatomických zakřivení.
- ☑ Rentgenkontrastní značky na obou koncích a uprostřed stentu - lepší viditelnost; přesné umístění stentu.
- ☑ Plastové repoziční vlákno na proximálním konci stentu - možnost repozice během 5 dnů po implantaci.

Doplňující údaje

K dispozici je 15 F (5,08 mm) zavaděcí systém ve standardní délce 95 cm (zavaděcí systém v délce 135 cm je dodán na požádání). Rentgenkontrastní a atraumatická olivka zavaděcího systému. Doporučený tuhý vodící drát o průměru 0,035" (0,89 mm).


Snadné rozvinutí

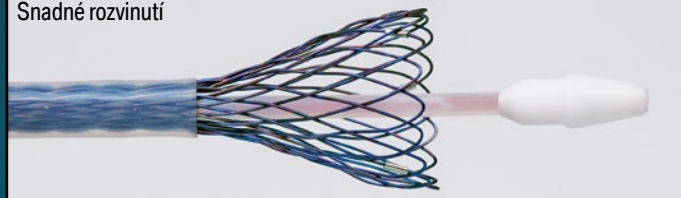

Nabízené rozměry

Číslo REF Nepotažená verze	Nominální průměr [mm]	Nominální délka [mm]
019-05-22-082	22	82
019-05-22-090	22	90
019-05-22-113	22	113
019-05-22-135	22	135
019-05-25-082	25	82
019-05-25-090	25	90
019-05-25-113	25	113
019-05-25-135	25	135
019-05-30-075	30	75
019-05-30-088	30	88
019-05-30-112	30	112
019-05-30-123	30	123
019-05-30-136	30	136



Vynikající flexibilita

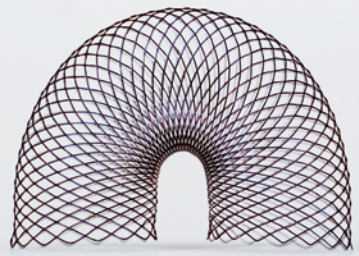

Plastové repoziční vlákno



Atraumatické konce stentu

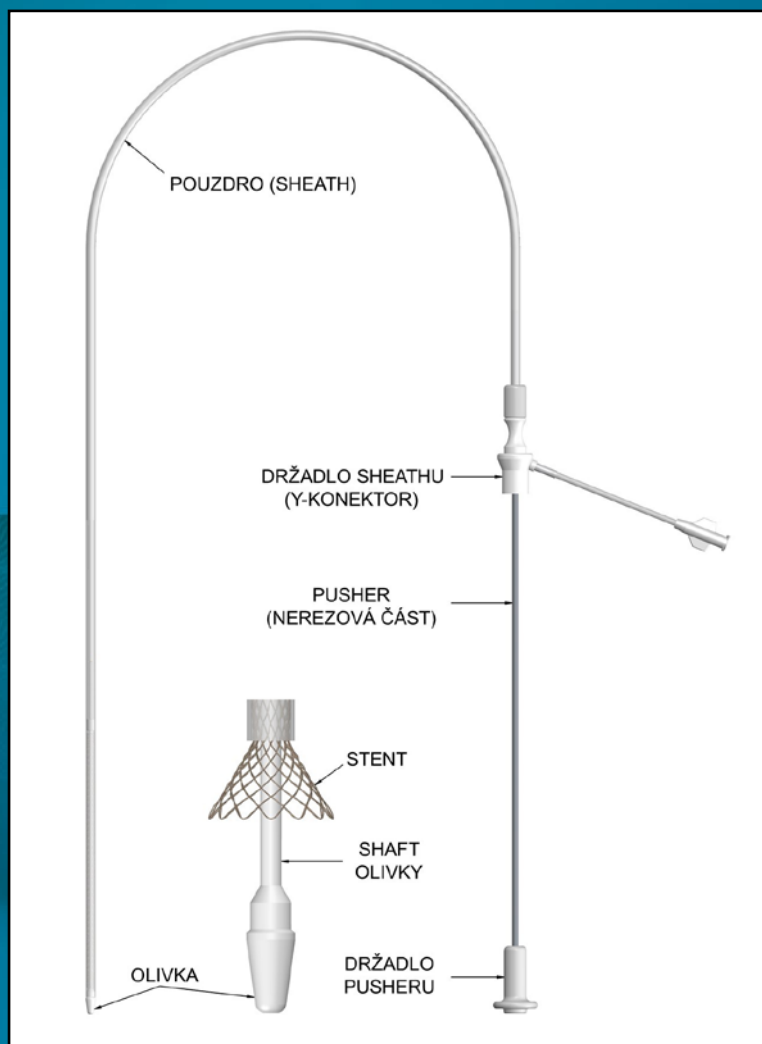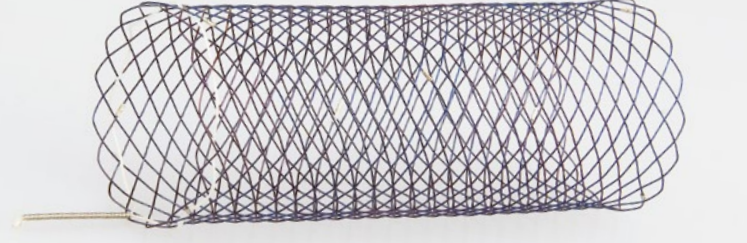

Výrobce:

ELLA-CS, s.r.o.

Milady Horákové 504/45, Třebeš
500 06 Hradec Králové, Česká republika

Tel.: +420 495 279 111 Fax: +420 495 265 655
E-mail: info@ellacs.eu URL: www.ellacs.eu