

ELLA Extraktor

Extraktor Jícnových SX-ELLA Stentů



ELLA Extraktor



Jednoduchá a spolehlivá extrakce

Atraumatické vyjmutí stentu

Umožňuje vyjmutí stentu, který migroval do žaludku

Rentgenkontrastní značky



3D animace



Základní popis

Extraktor Jícnových SX-ELLA Stentů - ELLA Extraktor

ELLA Extraktor slouží k vyjmutí Jícnových SX-ELLA Stentů:

- ☑ SX-ELLA Jícnový Stent - Flexella
- ☑ SX-ELLA Jícnový Stent - Flexella Plus
- ☑ SX-ELLA Jícnový Stent HV - HV Stent
- ☑ SX-ELLA Jícnový Stent HV - HV Stent Plus
- ☑ SX-ELLA Stent Danis - Danis Stent
- ☑ Jícnový stent Danis Seal

Doporučení k extrakci:

Danis Stent by měl být vyjmut do 7 dnů po implantaci. Jícnový stent Danis Seal by měl být vyjmut do 14 dnů po implantaci - po této době se použití extraktoru nedoporučuje.

Vyjmutí plně krytých stentů umístěných do benigních striktur se provádí během 4 týdnů po implantaci.


ELLA Extraktor se také může použít pro vyjmutí stentů, které migrovaly do žaludku.

Charakteristika a výhody

- ☑ **Atraumatické vyjmutí stentu** - stent je zcela vtažen do Overtube před jejím vyjmutím; je minimalizováno riziko poranění stěny jícnu.
- ☑ **Vysoká viditelnost pod RTG** - bowden extraktoru z nerezové oceli a rentgenkontrastní značky na Overtube; přesné provedení pod fluoroskopickou kontrolou.
- ☑ **Jedinečný design** - bezpečné vyjmutí stentu jak z místa implantace, tak z oblasti žaludku v případě migrace.
- ☑ **Použití TTS (Through The Scope)** - bowden je možné zavést do pracovního kanálu standardního endoskopu (2.8 mm); vývazové lanko stentu je uchopeno aretačním háčkem pod přímou vizuální kontrolou.




Doplňující údaje

9,4 mm (28 F) / Overtube délky 100 cm s rentgenkontrastní distální značkou.
2,6 mm / bowden z nerezové oceli délky 150 cm, který se skládá z vnitřního drátu s aretačním háčkem a oplátaného krytu.

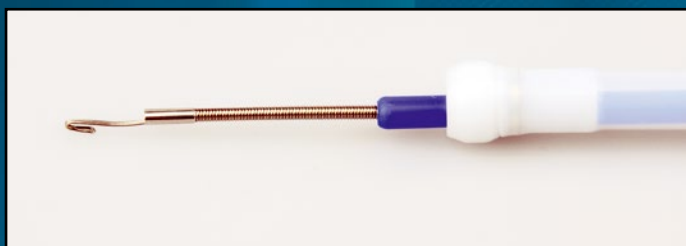

Nabízené rozměry

Číslo REF	Bowden		Overtube	
	Vnější průměr [mm]	Délka [cm]	Délka [cm]	Vnější průměr [F]
015-01-28-1000	2.6	150	100	28

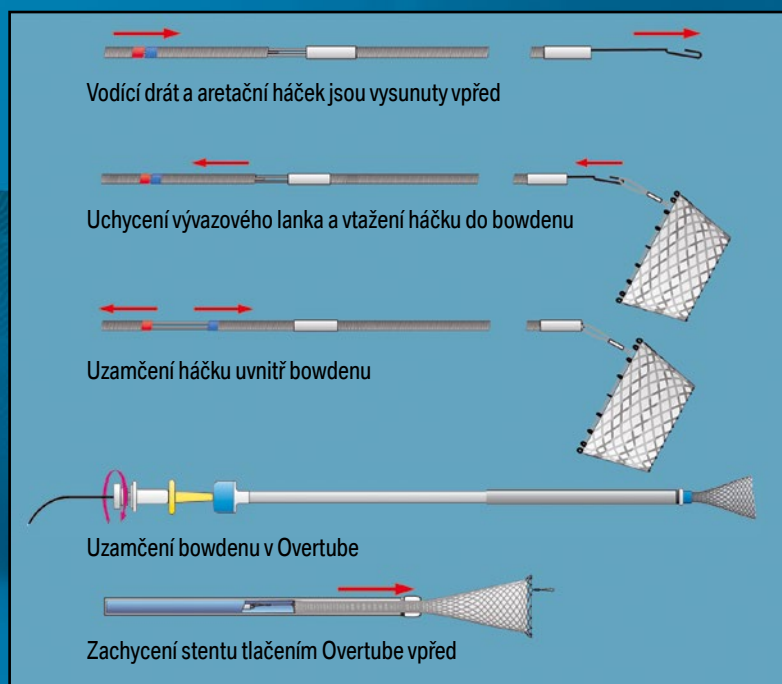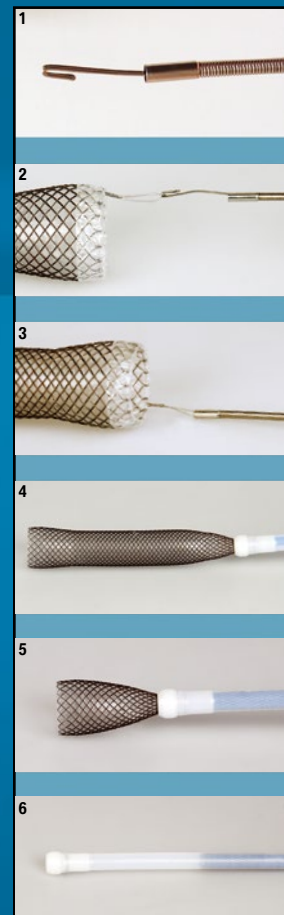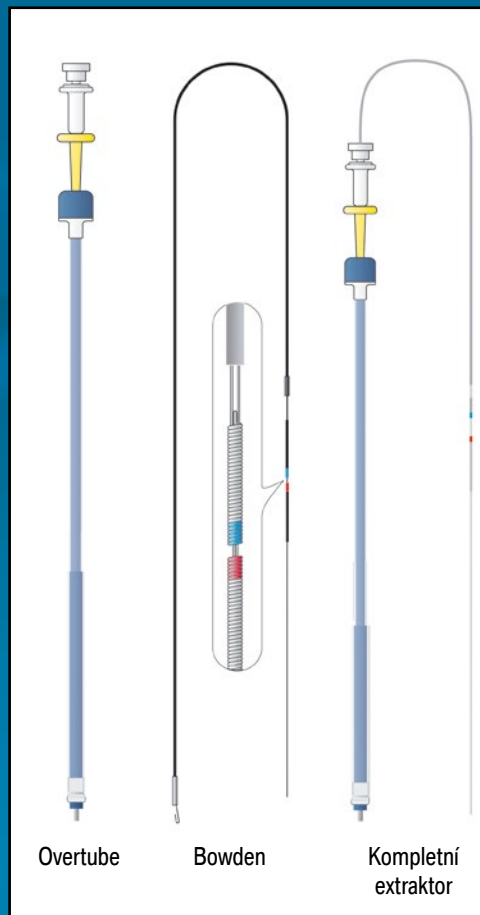

Výrobce:

ELLA-CS, s.r.o.

Milady Horákové 504/45, Třebeš
500 06 Hradec Králové, Česká republika

Tel.: +420 495 279 111 Fax: +420 495 265 655
E-mail: info@ellacs.eu URL: www.ellacs.eu