


Nitinella Plus

SX-ELLA Stent Biliární



Nitinella Plus

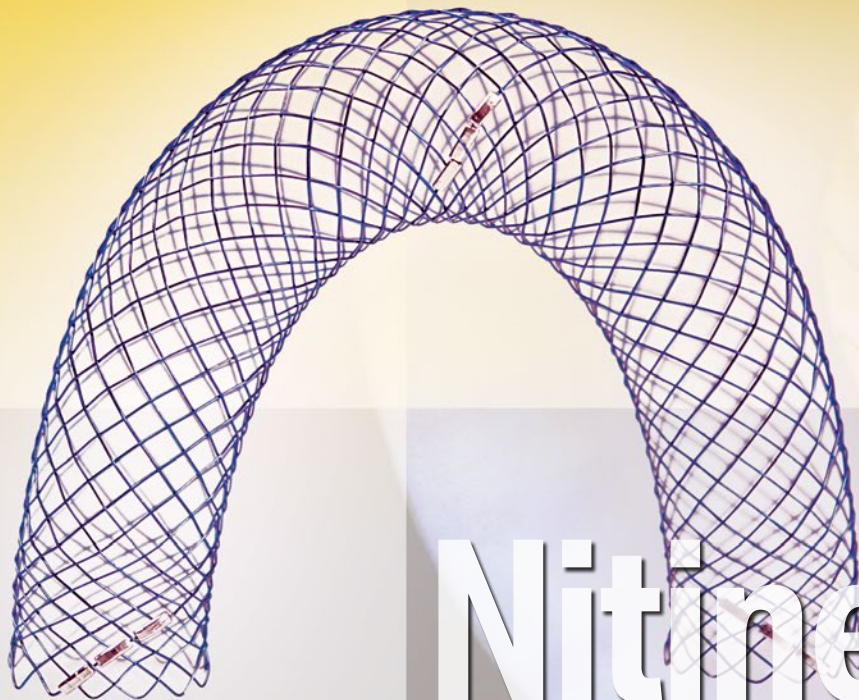

Nitinolový samoexpandibilní stent

Odolný silikonový potah

Zaváděcí systém odolný proti zalomení

Endoskopické a perkutánní zavedení



3D animace



SX-ELLA Stent Biliární Nitinella Plus / Nitinella Plus - B

Biliární stenty Nitinella Plus a Nitinella Plus - B jsou určeny k paliativní léčbě striktur biliárních cest způsobených maligními nádory.



Charakteristika a výhody

- ☑ Vynikající ohebnost - snadné zavedení podél anatomických zakřivení.
- ☑ Radiální síla zabezpečuje vyšší přilnavost a snižuje migraci.
- ☑ Optimalizované zkracování stentu - snazší umístění stentu.
- ☑ Atraumatické konce stentu - prevence podráždění stěny žlučového.
- ☑ Možnost zpětného vtažení - dokonalá kontrola průběhu rozvinutí a repozice.
- ☑ Rentgenkontrastní značky na obou koncích a uprostřed stentu - umožňují přesné umístění stentu.
- ☑ Odolný silikonový potah - brání nádorovému vrůstání do stentu.
- ☑ Oplétaný kryt zaváděcího systému odolný vůči zalomení - snadné zavedení a rozvinutí stentu.

Další údaje


Zaváděcí systém s rentgenkontrastní olivkou.

Doporučuje se zavádění po tuhém vodičím drátu o průměru 0,035" (0,89 mm) o délce nejméně 360 cm (endoskopické zavedení) nebo 180 cm (transhepatální zavedení).

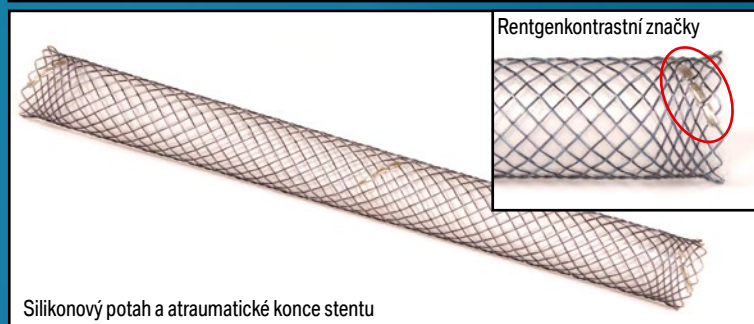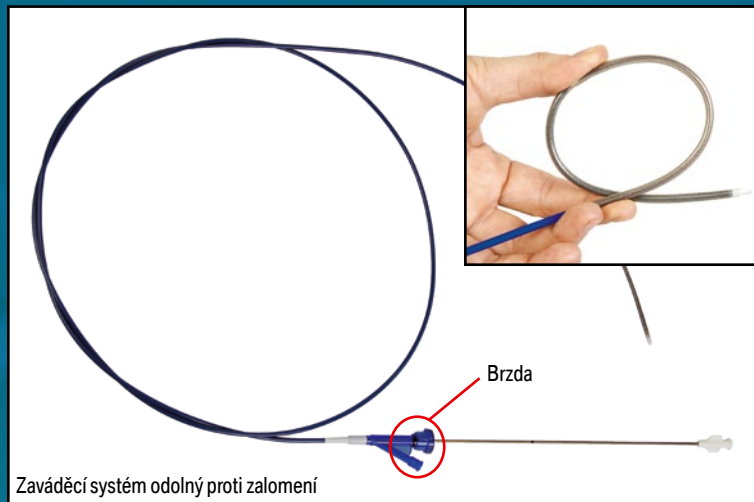

Nabízené rozměry

Endoskopický zaváděcí systém - 175 cm						Transhepatální zaváděcí systém - 60 cm		
Číslo REF						Číslo REF		
Průměr těla stentu [mm]	Délka stentu [mm]	Průměr zaváděcího systému [F]	Nitinella Plus - B Nekrytý stent	Nitinella Plus Částečně krytý stent	Nitinella Plus Plně krytý stent	Nitinella Plus - B Nekrytý stent	Nitinella Plus Částečně krytý stent	Nitinella Plus Plně krytý stent
8	40	7 pro nekrytý / 9 pro krytý	019-01B-08-040	019-01C-08-040	019-01D-08-040	019-01B-08-040-T	019-01C-08-040-T	019-01D-08-040-T
	60		019-01B-08-060	019-01C-08-060	019-01D-08-060	019-01B-08-060-T	019-01C-08-060-T	019-01D-08-060-T
	80		019-01B-08-080	019-01C-08-080	019-01D-08-080	019-01B-08-080-T	019-01C-08-080-T	019-01D-08-080-T
	100		019-01B-08-100	019-01C-08-100	019-01D-08-100	019-01B-08-100-T	019-01C-08-100-T	019-01D-08-100-T
10	40	7 pro nekrytý / 9 pro krytý	019-01B-10-040	019-01C-10-040	019-01D-10-040	019-01B-10-040-T	019-01C-10-040-T	019-01D-10-040-T
	60		019-01B-10-060	019-01C-10-060	019-01D-10-060	019-01B-10-060-T	019-01C-10-060-T	019-01D-10-060-T
	80		019-01B-10-080	019-01C-10-080	019-01D-10-080	019-01B-10-080-T	019-01C-10-080-T	019-01D-10-080-T
	100		019-01B-10-100	019-01C-10-100	019-01D-10-100	019-01B-10-100-T	019-01C-10-100-T	019-01D-10-100-T

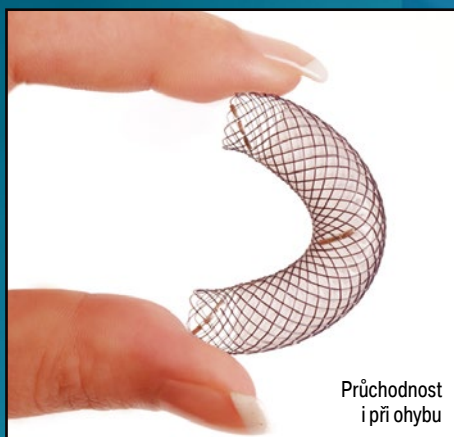

Výrobce:

ELLA-CS, s.r.o.

Milady Horákové 504/45, Třebeš
500 06 Hradec Králové, Česká republika

Tel.: +420 495 279 111 Fax: +420 495 265 655
E-mail: info@ellacs.eu URL: www.ellacs.eu